

Cómo usar el test rápido de antígenos

Las instrucciones de los test varían según la marca. En muchos kits de test rápidos de antígenos se deben seguir las instrucciones que se indican a continuación, pero no en todos. Sigue las instrucciones del fabricante.

Recolección de la muestra



1 Tomar un hisopo de la bolsa.



2 Introducir el hisopo en una de las fosas nasales y empujarlo de 2 a 3 cm hacia el interior de esta.



3 Hacer girar lentamente el hisopo 5 veces contra la pared de la fosa nasal. Con el mismo hisopo, repetir este proceso de recolección en la otra fosa nasal.



4 Consultar las instrucciones que figuran en la caja del kit para confirmar el tiempo que debe transcurrir para leer el resultado. Esto puede variar según el kit.

Test de la muestra



5 Retirar el sello de papel de aluminio de la parte superior del tubo de extracción, que contiene la disolución amortiguadora.




6 Colocar el hisopo en el tubo. Revolver el hisopo enérgicamente haciendo círculos con él al menos 5 veces.




7 Retirar el hisopo haciéndolo girar contra el tubo y apretando los lados para que expulse el líquido que contiene.



8 Colocar el tapón suministrado en el tubo y empujarlo con firmeza contra él. Dar golpecitos con el dedo a la parte inferior del tubo para mezclar bien.

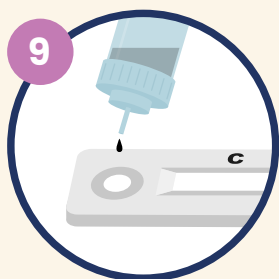

9 Dar la vuelta al tubo y sostener la muestra por encima de la zona de siembra. Apretar suavemente el tubo. Dejar que caigan de 3 a 5 gotas en la zona de siembra.

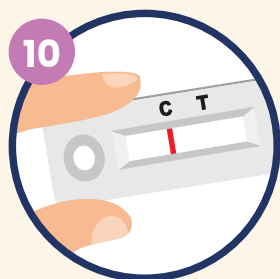

10 Leer las instrucciones del kit y respetar el tiempo que se debe aguardar para obtener el resultado del test. Desechar el kit usado en la basura general.

Lectura del resultado


Negativo

Una línea junto a la letra **C** indica que el resultado es negativo.




Positivo

Dos líneas, una junto a la **C** y otra junto a la **T** (aunque sean tenues), indican que el resultado es positivo.

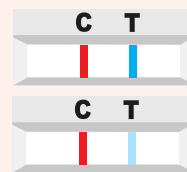

Resultado inválido

Si no hay ninguna línea junto a la **C**, el resultado no es válido. En ese caso hay que volver a hacer el test. Sigue las indicaciones del fabricante respecto de cuánto tiempo hay que esperar.

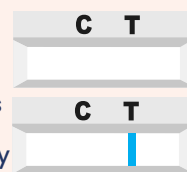

Notificación del resultado

Es necesario notificar el resultado. Esto puede hacerse en My Covid Record.

Inicia sesión en mycovidrecord.health.nz o llama al 0800 222 478 y pulsa la opción 3.


Si estás comprendido en el régimen de exención de los contactos estrechos (Close Contact Exemption Scheme), debes informar a tu empleador del resultado.




COVID-19 – Orientación sobre los test




Persona sintomática: persona que presenta uno o varios síntomas de la COVID-19. Visita covid19.govt.nz para obtener más información.

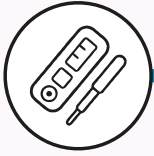

Hazte un test rápido de antígenos en cuanto consigas uno. Si el resultado da positivo, regístralo y recibirás más información.

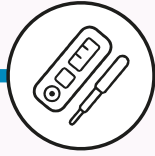


Hazte el test una vez más 48 horas después si el primer test dio negativo pero sigues teniendo síntomas. Si vuelves a dar negativo, ponte en contacto con un profesional de la salud para que te ayude.

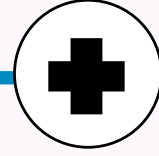

NOTA
Si una persona con la que vives da positivo en las pruebas de COVID-19, consulta el cronograma de test que se aplica a los contactos domésticos (el escenario que figura a continuación).



Contacto doméstico: persona que vive en la misma casa que alguien que tiene COVID-19, pero que no tiene síntomas.

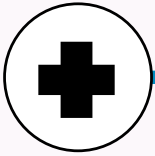


Una persona de tu casa da positivo en el test de COVID-19.



Hazte un test rápido de antígenos **3 días** después de que la persona que tiene COVID-19 haya dado positivo.








Si aparecen síntomas, debes tomar las medidas que se aplican a las personas sintomáticas (el escenario anterior).

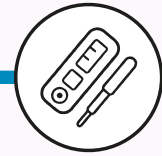

Si no aparecen síntomas, tienes que hacerte otro test **7 días** después de que la persona que tiene COVID-19 haya dado positivo.



Trabajador esencial acogido al CCES: se refiere a alguien que es un trabajador esencial y tiene derecho a acogerse al régimen de exención que se aplica a los contactos estrechos. Visita business.govt.nz para obtener más información.

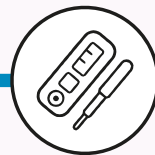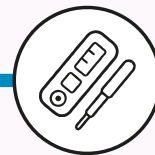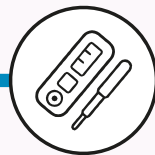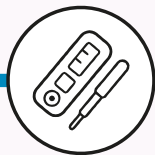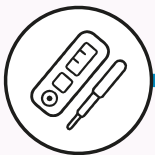

Hazte el test cada día de trabajo para comprobar que dé negativo. No es necesario que te hagas el test los días que no trabajes, pero sí que sigas las orientaciones que el régimen CCES brinda a los trabajadores esenciales.